

Para pacientes implantados que tengan mando a distancia

Lista de control sobre RM para pacientes

Si el médico solicita una RM:

- ✓ Informe al médico solicitante de que lleva implantado un dispositivo de estimulación de la médula espinal.
- ✓ Asegúrese de llevar consigo su tarjeta de ID del paciente y el mando a distancia. Si no tiene la tarjeta de ID del paciente, llame al equipo de asistencia de Nevro HFX.
- ✓ **Antes de la exploración por RM, todos los pacientes que lleven implantado un dispositivo HFX deben someterse a una prueba de impedancia.** Antes de concertar la cita para la RM, asegúrese de contactar con el equipo de asistencia de Nevro HFX. El técnico en radiología y el equipo de asistencia de Nevro HFX confirmarán los resultados antes de la RM.

Al concertar una cita para una RM:

- ✓ Facilite la siguiente información al centro en el que vaya a concertar la cita de RM:
 - Indique que lleva un estimulador de la médula espinal Nevro HFX.
 - Indique si lleva otros dispositivos médicos implantados.
 - Proporcione una descripción detallada del dispositivo, incluidos su referencia de producto, electrodos y otros componentes del implante (esta información aparece en su tarjeta de ID del paciente).
 - Proporcione los datos de contacto del médico que le implantó el dispositivo.
 - Comparta la directrices de RM, que se pueden encontrar en www.Nevro.com/Manuals.
- ✓ Su médico y el técnico en radiología utilizarán esta información para determinar si usted puede someterse de forma segura a una RM.



PTRC1000




PTRC2300



PTRC2500



PTRC3000

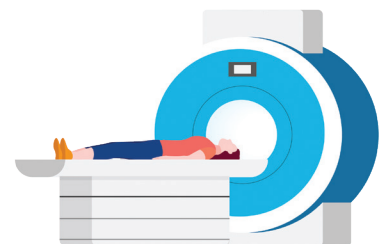


Asegúrese de que su dispositivo esté a plena carga antes de la RM.

Para pacientes implantados que tengan mando a distancia

Lista de control sobre RM para pacientes

Cómo prepararse para la cita de RM:

- ✓ Comuníquese con su equipo de atención de Nevro HFX para confirmar que puede programar de manera segura la exploración por resonancia magnética.
- ✓ Lleve su tarjeta de ID de paciente y el mando a distancia a la cita de RM.
- ✓ Asegúrese de cargar el GII y de que la estimulación esté desactivada antes de someterse a la exploración por RM. Puede desactivar la estimulación con el mando a distancia.
- ✓ Después de la RM, vuelva a encender el sistema con el mando a distancia y póngase en contacto con su médico o el equipo de asistencia de Nevro HFX para garantizar que su dispositivo siga programado con los parámetros previos a la RM.

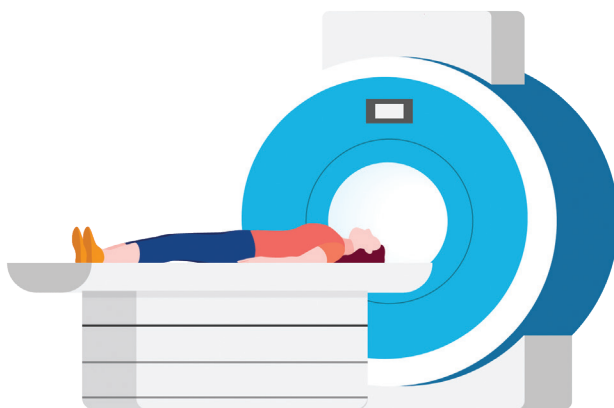

¿Necesita ayuda?

Contacte con el equipo de asistencia local de Nevro HFX, que le ayudará a encontrar un centro compatible con los estimuladores de la médula espinal y a reunir la información necesaria, además de poder contestar a sus preguntas.



Directrices de RM para el técnico en radiología

Escanee el código para acceder a la información detallada sobre compatibilidad de RM o visite [Nevro.com/manuals](https://www.nevro.com/manuals).

Nota: HFX y HFX iQ son aptos para RM en determinadas condiciones. Las condiciones autorizadas para la RM varían en función del modelo de dispositivo (incluido el tipo de cable) implantado. Repase atentamente las Directrices de RM de Nevro HFX con su médico, técnico en radiología o el equipo de asistencia de Nevro HFX antes de someterse a una exploración por RM.

SENZA, SENZA II, SENZA OMNIA, OMNIA, HF10, el logotipo de HF10, 10 kHz Therapy, HFX, el logotipo de HFX, HFX iQ, HFX Algorithm, HFX CONNECT, el logotipo de HFX Connect, HFX COACH, el logotipo de HFX Coach, HFX CLOUD, el logotipo de HFX Cloud, RELIEF MULTIPLIED, el logotipo X, NEVRO y el logotipo de NEVRO son marcas comerciales o registradas de Nevro Corp. © 2024 Nevro Corp. Todos los derechos reservados.